

384. Ready. Set. Pipette!

384ウェルプレートへのピペッティングをより簡単に
NEW: 16 or 24-channel pipettes and epT.I.P.S.® 384

16 and 24 Wells in Just One Step

384ウェルプレートへのピペッティングを容易に

384ウェルプレートへの分注に、より効率的な手動でのピペッティング方法をご紹介します。

エッペンドルフの新しい16-, 24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.® 384が、384ウェルプレートでの作業をより便利で、身体にやさしく、安全にします。

384ウェルを1分で分注

> 8-, 12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。

> 自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。

> 現在のスループットを向上させ、96から384ウェルへ。もうためらう理由はありません！

SOFteject チップエジェクション

- > 連続したチップエジェクションもスムーズ
- > チップエジェクションに必要な力を50%削減

チャンネル標記

- > 両端のチャンネル番号のラベリング
- > ピペットを常に同じ向きで使用可能

スプリング式ノーズコーン*

- > チップ装着に必要な力を最小限に
- > 揺り動かしたり、叩きつけたりする必要がありません
- > チップのフィット感が手に伝わる感覚でわかります

* 1 mL以下の全てのエッペンドルフピペットに備わっています



16-, 24-チャンネルピペットは、世界中で使用されている手動タイプのリサーチプラスと、電動タイプのXplorer plusがあります。

丸みを帯びたノーズコーン


- > 16-, 24-チャンネル用チップがなめらかに装着できます

epT.I.P.S. 384のSOFTattachテクノロジー

- > スムーズで均一なチップ着脱により、負担を軽減します
- > 高いチップフィットと密閉性
- > 同一線上に並んだ完璧なチップの配列
- > 極めて優れたチップの成型により384ウェルに完全にマッチします



Ergonomics – Practiced Innovation

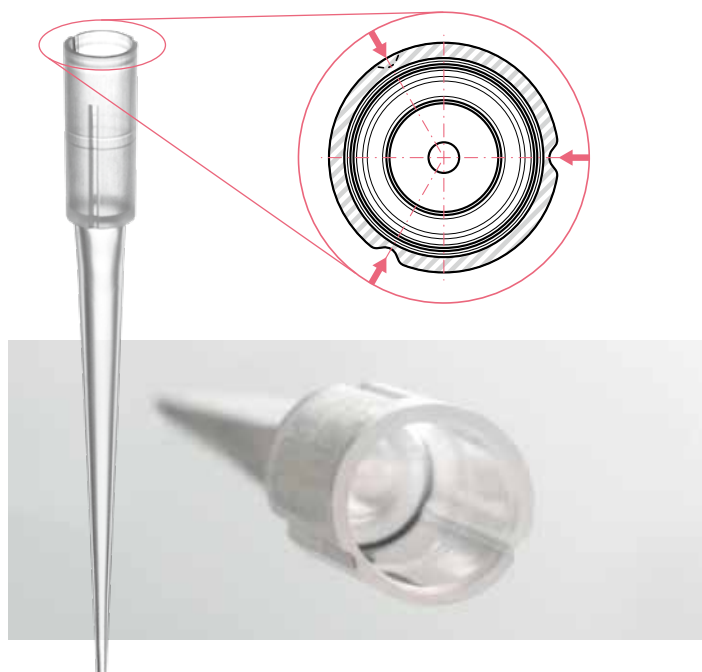


重要なイノベーションー

epT.I.P.S. 384のSOFTattachテクノロジー

ピペットチップに弾力をもたせる溝を初めて導入しました。チップが伸縮し、装着にかかる力を最小限に抑えつつ、完璧なフィットを可能にします。


メリット:

- > チップのフィットと密閉性の信頼性が向上
- > チップの着脱にかかる力を削減

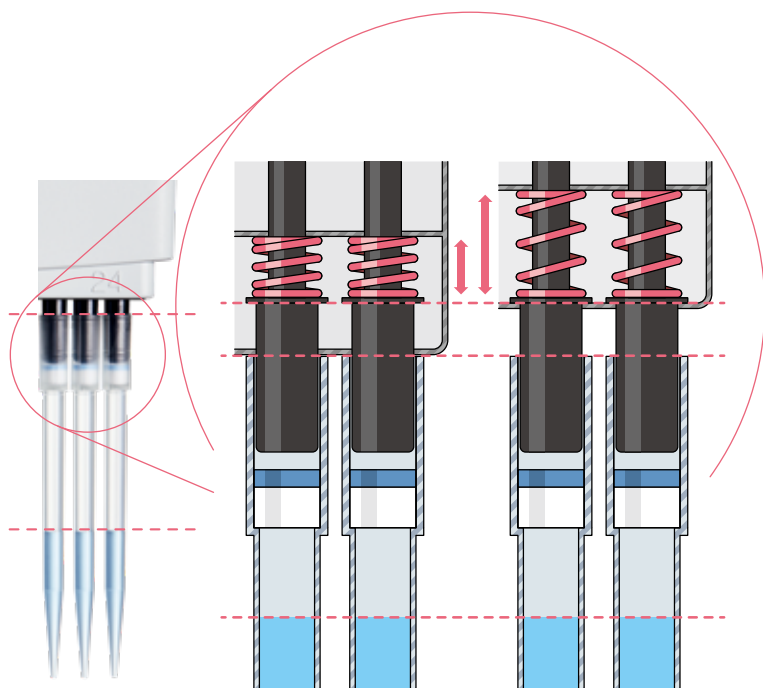

身体に優しく安全な作業のためのスプリング式ノーズコーン

- > チップ装着にかかる力を削減
- > チップのフィット感が手に伝わる感覚でわかります
- > 液体を均一に吸引

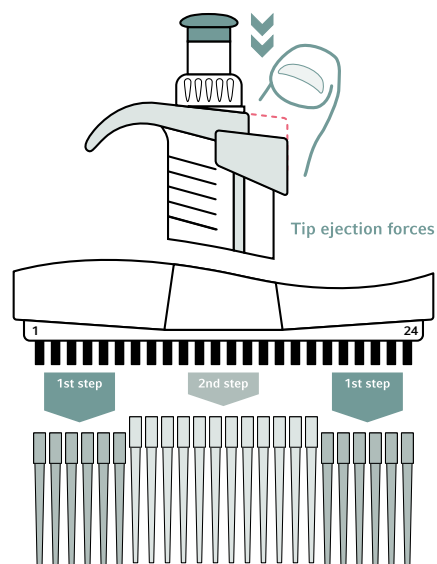

チップエジェクトにかかる力を抑えるSOFTject

まず外側のチップをエジェクトしてから、内側のチップがイジェクトされます。これによりチップエジェクトにかかる力を50%抑えられます。

マイクロピペットの注文案内

機種	チャンネル数	操作ボタンの色	容量範囲	最小可変単位	注文番号
手動ピペット リサーチプラス	16 チャンネル	■ ライトピンク	1-20 µL	0.02 µL	3122000078
		■ ライトイエロー	5-100 µL	0.1 µL	3122000094
	24 チャンネル	■ ライトピンク	1-20 µL	0.02 µL	3122000086
		■ ライトイエロー	5-100 µL	0.1 µL	3122000108
電動ピペット Xplorer plus	16 チャンネル	■ ライトピンク	1-20 µL	0.02 µL	4861000778
		■ ライトイエロー	5-100 µL	0.1 µL	4861000792
	24 チャンネル	■ ライトピンク	1-20 µL	0.02 µL	4861000779
		■ ライトイエロー	5-100 µL	0.1 µL	4861000793

ピペットチップの注文案内

製品名	純度	トレーの色	容量範囲	販売単位	注文番号
epT.I.P.S. セット 384 ^{*1}	Eppendorf Quality	■ ライトピンク	0.1-20 µL	1,920 本 (384 本× 5 トレー)、 チップボックス 1 箱	0030076273
		■ ライトイエロー	5-100 µL		0030076281
epT.I.P.S. リロード 384	Eppendorf Quality	■ ライトピンク	0.1-20 µL	3,840 本 (384 本× 10 トレー)	0030076044
		■ ライトイエロー	5-100 µL		0030076052
epT.I.P.S. リロード 384 PCR clean	PCR clean ^{*2}	■ ライトピンク	0.1-20 µL	”	0030076001
		■ ライトイエロー	5-100 µL		0030076010
ep Dualfilter T.I.P.S. 384	滅菌済、 PCR clean ^{*2}	■ ライトピンク	0.1-20 µL	3,840 本 (384 本× 10 箱)	0030078853
		■ ライトイエロー	5-100 µL		0030078861

*1 同梱されている再利用可能ボックスが epT.I.P.S. ボックスから epT.I.P.S. ボックス 2.0 に順次切り替わります。

*2 PCR clean: Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free をロット毎に試験しています。


製品の仕様、外観等は予告なしに変更することがあります。

Workflow

Complete Solutions from Eppendorf

マイクロプレートやサーマルサイクラー、サーモミキサー、遠心機など、384ウェルのワークフローに必要な製品をご提供いたします。

詳しくはこちら：www.eppendorf.com

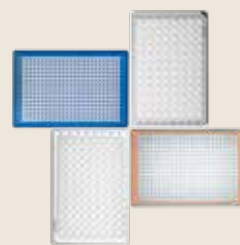

384-well plates



ThermoMixer® FP



Mastercycler® X50h



Centrifugation

www.eppendorf.com

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-5 Tel: 03-5825-2361 Email: info@eppendorf.jp

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Research®, Eppendorf Xplorer®, ep Dualfilter T.I.P.S.®, epT.I.P.S.®, Eppendorf ThermoMixer® and Mastercycler® are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. Eppendorf Quality™ is a trademark of Eppendorf SE, Germany. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2022 by Eppendorf SE. Printed in Japan.