



Absolute Tubes

순도 100%의 안전함과 견고함! Eppendorf Tubes®

Best Performance for Your Samples


Eppendorf Tubes 15/50mL
특정 제품 4박스 구매시 1박스 Free!



Order information	
Description	Order no.
행사모델	
Conical Tubes 15 mL, sterile, bulk 500pcs	0030122151
Conical Tubes 50 mL, sterile, bulk 500pcs	0030122178


견적신청하기

소중한 샘플에 Eppendorf Conical Tube

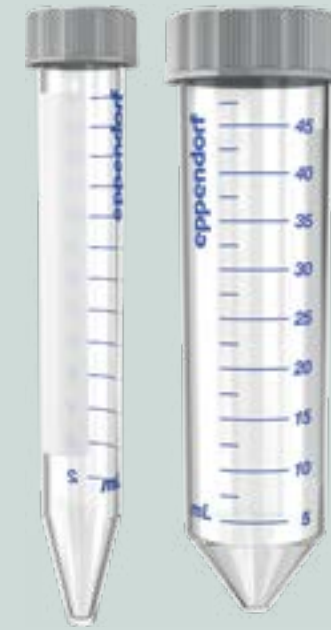

Maximum 19,500 x g

높은 원심분리시에도 튜브 변형이나 손상없이 안전하게 사용

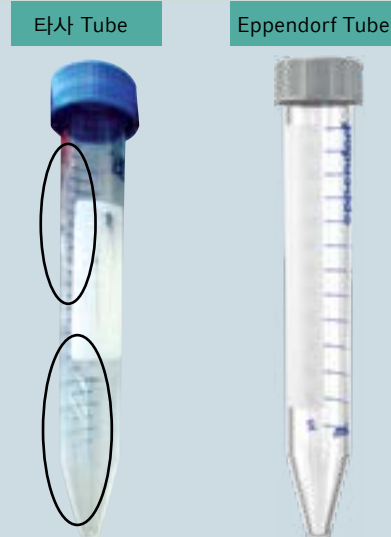


Conical tube 원심력 안전성 비교
Eppendorf Conical tube : 높은 원심력에도 변형 없음

[Eppendorf APPLICATION NOTE No. 343]

샘플 : water:phenol:chloroform (2:1:1)
유기 용매를 넣어 18,000 x g 로 원심분리시 타사 conical tube의 변형 예
*타제품 경우 튜브 벽면 및 Lid 부분 손상

No Leachables

프리미엄 순도 물질로 제조 : 윤활제, 살생제 등 플라스틱 불순물이 없어 side effect 없음

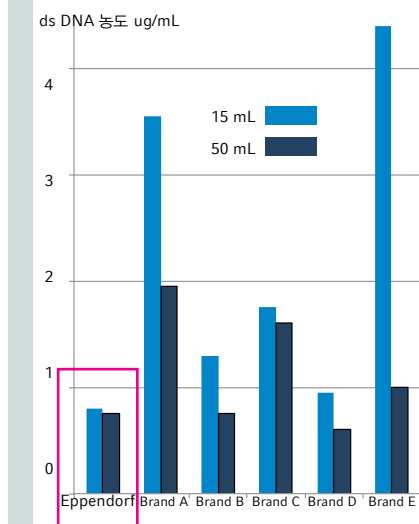


Eppendorf : 260nm 핵산 정량시 ghost effect 거의 없음

Eppendorf Conical Tube material :
> USP (미국 약전) Class VI 인증 (메디컬 생체 물질용 승인)
> Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase and DNA-free


Tightness & Easy Handling

특수 디자인 cap : 샘플 증발 우려 없음

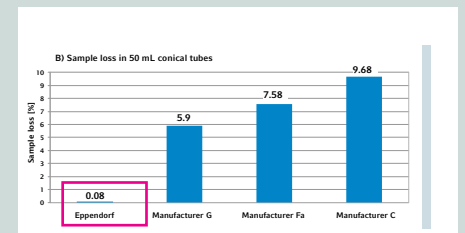

50mL conical tube 샘플 손실을 비교
Eppendorf Conical tube 샘플 증발/손실 거의 없음

에탄올을 -86°C에서 24시간 동안 보관 후 샘플 손실을 비교

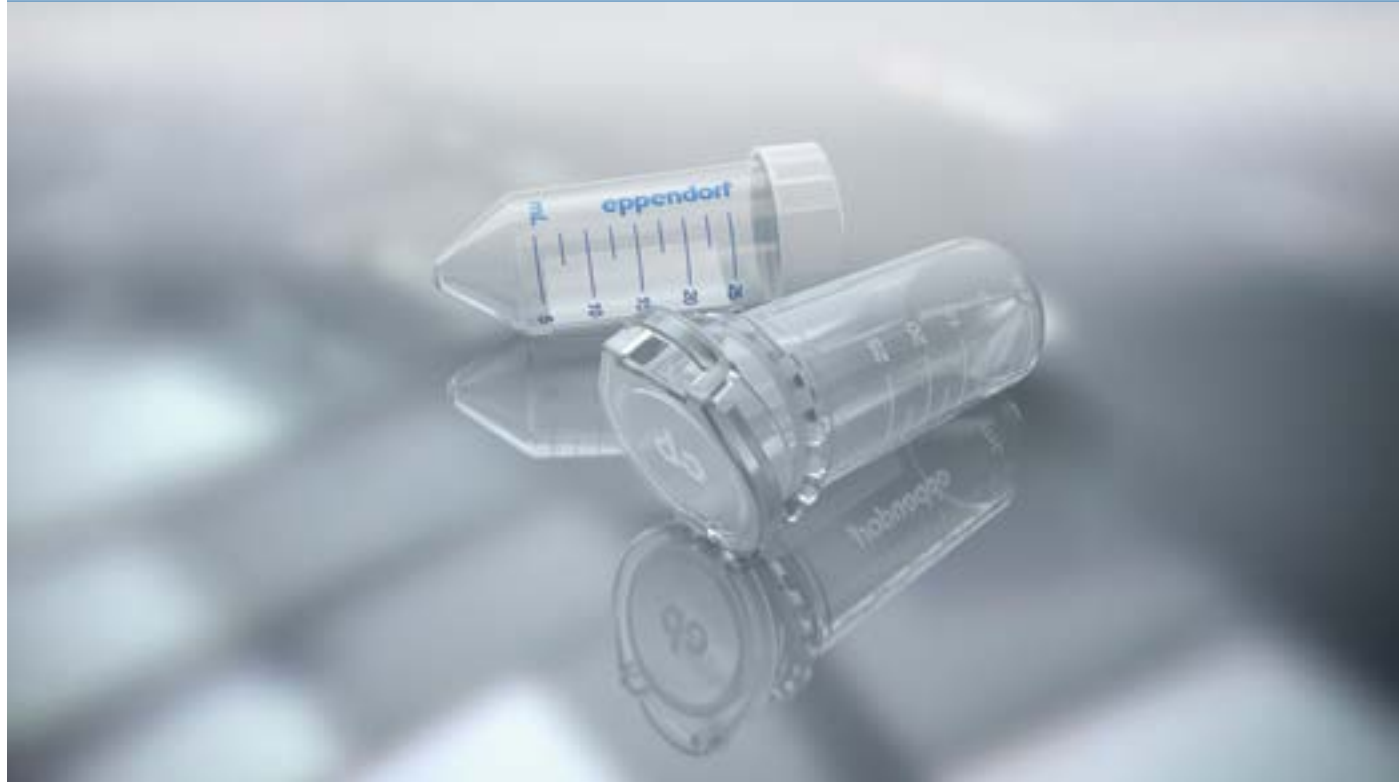

The Next Level!

소중한 샘플을 위한 최선의 선택! Eppendorf Tubes®

Best Performance for Your Samples

Eppendorf Tubes 25mL
특정 제품 4박스 구매시 1박스 Free!



Order information	
Description	Order no.
행사모델	
Tubes 25 mL,snap cap, steril, 150 pcs pyrogen-, DNase-, RNase-, human & bacterial DNA-free, transparent, (6bags x 25 tubes)	0030118421
Tubes 25 mL,screw cap, steril, 200 pcs pyrogen-, DNase-, RNase-, human & bacterial DNA-free, transparent, (8bags x 25 tubes)	0030122437

견적신청하기

혁신적인 Eppendorf 25mL Conical Tube



Minimized risk of contamination

> 기존 15/50mL conical tube 대비 길이가 20% 짧고
직경은 50mL conical tube와 동일하게 넓기 때문
피펫이 Tube벽에 닿아 오염됨을 최소화



Lower height - Better sample availability

> 기존 15/50mL conical tube 사용시에는 길이 때문에
전체 샘플 회수는 쉽지 않음

> 25mL conical tube 직경은 50mL conical tube와 동일
하고 길이는 더 짧아 빠른 샘플 접근 가능
원심분리 후 빠른 pellet resuspension 가능

25 mL Tube 악세서리/제품번호



50mL conical tube용 로터 원심분리시 (1SET = 6ea)
> 25 mL snap cap용 아답터 노란색 (5820733004)
> 25 mL screw cap용 아답터 회색 (5820734000)



ThermoMixer® C/ ThermoStat™ C 사용시
> SmartBlock 50 mL용 아답터 블루 (1SET=4ea)
(5365000109)



Space saving 보관박스 (3.5인치) (1SET =2ea)
> 9 x 25mL tube 보관 (0030140729)



Single Tube Stand (1SET = 4ea)
> 무게를 제거나 단독 사용시 (0030119860)



Tube Rack (1SET = 2ea)
> 50mL tube rack 사용 (0030119835)